

revigreen reglow



Renovação tecidual com maior viabilidade biológica.

Revigreen Reglow é um dispositivo que possibilita o processamento de pequenas amostras de tecido obtidas com um punch dérmico, através de um sistema preciso e delicado de micronização para a preparação de microenxertos autólogos, de modo **prático, rápido e independente** de equipamentos eletrônicos.

Preparo
em apenas



Com 6 passos que levam apenas 10 minutos no total, é possível preparar uma solução segura e custo-efetiva, proporcionando um produto de alta qualidade e viabilidade tecidual, tanto para a renovação capilar quanto da pele.

Pureza e viabilidade

As amostras de tecido são retiradas da região posterior das orelhas ou couro cabeludo, que apresenta elevada viabilidade biológica¹.

O grande diferencial no preparo destes microenxertos está na tecnologia avançada do processador Microlyzer.

Sua configuração em cartucho liga-se aos conectores luer em seus dois lados e realiza milhares de microcortes em suas lâminas de tecnologia superior, projetadas com o exclusivo "Honeycomb Design".



Microlyzer
t-lab
HONEYCOMB
DESIGN

Em um lado conecta-se a seringa com o tecido coletado, e do outro, uma seringa de mesmo volume contendo soro fisiológico ou PRP.



Indicações gerais


Revigeen Reglow possui diversas indicações terapêuticas, como:

Rejuvenescimento facial
Remoção de rugas e flacidez
Alopecia de diversas causas
Restauração capilar
Pré e pós-transplante capilar
Tratamento de queimaduras e cicatrizes



Modo de usar

A passagem da suspensão pelo Processador Microlyzer de 600 μm libera os microenxertos de tecidos fibrosos e promove sua purificação, além de preservar a viabilidade biológica do produto que será injetado. Em seguida, a suspensão passa uma vez pelo filtro de 150 μm para eliminar qualquer tecido indesejado.

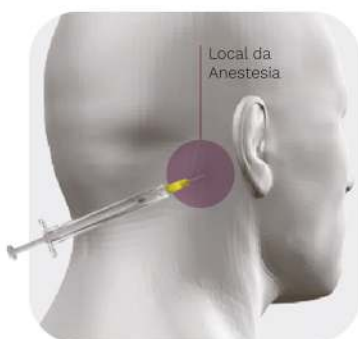

01. PREPARAÇÃO



02. COLETA DOS ENXERTOS



03. TRANSFERÊNCIA



04. PROCESSAMENTO TECIDUAL
NO MICROLYZER DE 600 μm



05. FILTRAGEM NO
MICROLYZER DE 150 μm



06. PREPARO PARA A
INJEÇÃO

IMPORTANTE

A Nexgeen não faz aconselhamento clínico. Os conteúdos apresentados em nossos materiais promocionais, guias, técnicos e website possuem apenas finalidade de informação geral. As informações não se destinam a substituir o aconselhamento, diagnóstico ou tratamento de um profissional de saúde. A confiança em qualquer informação fornecida nos nossos materiais promocionais é exclusivamente de sua própria conta e risco, pois as necessidades clínicas de cada indivíduo são muito diferentes. Você jamais pode presumir que estas informações relativas a determinadas condutas de tratamento ou resultados também são aplicadas a você. Em vez disso, você deve avaliar sua condição clínica e tomar decisões de tratamento com base em uma consulta com um profissional de saúde de sua confiança.

REFERÊNCIA

1. Fernandes IR, Russo FB, Pignatari GC, et al. Fibroblast sources: Where can we get them? Cytotechnology. 2016 Mar;68(2):223-8. doi: 10.1007/s10616-014-9771-7.

Revigeen Reglow é aprovado pela Anvisa sob número de notificação 82693019004. Demais componentes com notificação 82251719006 e 82251719007.



Aponte sua
câmera para o
QR CODE
para saber mais!

Rua Francesco Coppini, 68 - 2º andar
Nova Gerty, São Caetano do Sul - SP | CEP: 09580-000
comercial@nexgeen.com.br +55 (11) 2668 5368
nexgeen.com.br

nexgeen
BIOSOURCE